


電子冷却式 血液搬送装置 ATR700-RC05

【屋外持出用】

東京都赤十字血液センター殿 試験運用中



■ 性能データ

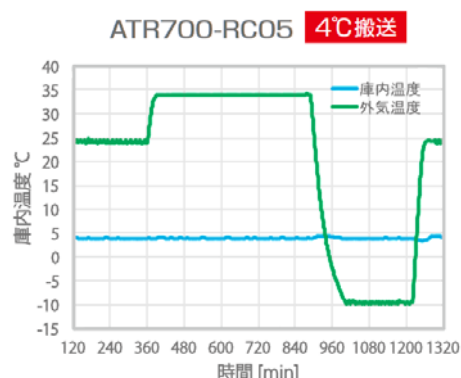

製品特徴

- 新設計の電子冷却システム採用。
- 庫内温度を4℃±2℃で高精度温調。
- 外気温度変化に強い新熱電制御システム。
- 小型軽量コンパクトです。
- 標準電池で7時間の動作可能。(最長14時間)※
- 庫内温度、記録時間、フタ開閉などのイベント記録。
- 専用ソフトで、記録データをPC管理できます。
- カーインバータ使用で長時間の車搬送が可能
- 外部電源接続で長期間の冷蔵運転ができます。
- 航空機モードスイッチで航空機に積載可能です。


※周囲25℃ (電池2個使用時)

■ 小笠原搬送記録データ



仕様

- 品 名 : 血液搬送装置
- 形 名 : ATR700-RC05
- サ イ ズ : W400×D250×H350mm
- 質 量 : 6.6kg(本体)
- 温調方式 : 電子冷却式
- 庫内温度 : 4℃±2℃
- 外気条件 : -10℃～+35℃
- 機 能 : 温度記録、フタ開閉記録、RFIDタグ管理 等

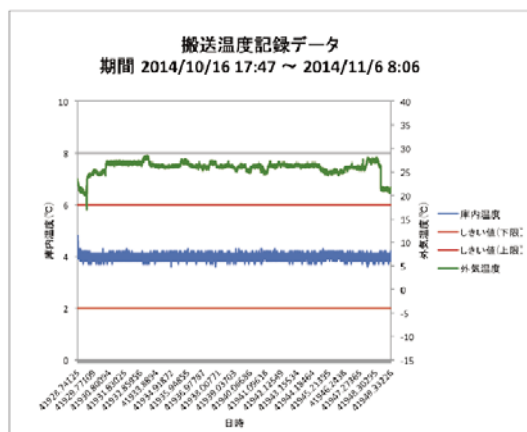

東京都赤十字血液センター殿ご提供

電子冷却式 血液搬送装置

ATR650-RC05

【屋内搬送用】



病院内の赤血球製剤搬送管理に最適です。
薬事法に準拠して血液製剤の搬送管理ができます。



血液製剤品質の維持

赤血球製剤を $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ のまま
使用する場所で保管できます。

製剤管理手間の削減

血液製剤出庫が1度で済むため
製剤管理の手間とコストを減らせます。

血液製剤廃棄削減

搬送した血液製剤を安全・安心に回収
できるため製剤の廃棄削減ができます。

特長

- 赤血球製剤RBC-LR2(2U)を5パック収納。
- 赤血球製剤を $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ で維持。
- 内蔵電池で長時間搬送。
- 外部電源接続で長期間保管もできます。
- 庫内温度を記録(1分毎/21日間)。
- 庫内温度逸脱前にアラームを発します。
- カーインバータ使用で車の長時間持出が可能。
- 記録データは専用ソフトでPC管理できます。

仕様

- 1.品名 :血液搬送装置
- 2.型番 :ATR650-RC05
- 3.庫内収納:3.8L ※RBC-LR2-5パック
- 4.搬送温度: $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- 5.環境温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- 6.質量 :6.6kg(本体)
- 7.寸法 :W400×D250×H300mm
- 8.機能 :①表示(庫内温度・最大・最少・記録時間)
②記録(庫内温度/記録時間/フタ開閉・他)
③アラーム機能
④LED-電源/電池状態/スタンバイ/記録・他